



Wristar MultiAx
Kit stérile pour radius distal. _____

Données et images

Intrauma S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et à la finition des produits présentés et décrits dans ce catalogue sans préavis.

Les images constituent des exemples illustratifs présentées à titre informatif.

Les informations affichées concernant les caractéristiques générales des produits présentés ne sont qu'à titre indicatif.

Ces informations ne constituent en aucun cas une description des caractéristiques spécifiques par le fabricant.

Nous invitons donc le client à toujours contacter la société Intrauma S.p.A. pour obtenir des informations complètes sur les caractéristiques spécifiques.

© Le contenu des pages de ce catalogue est protégé par le droit d'auteur.

La reproduction des contenus est possible si elle est expressément autorisée par Intrauma S.p.A.

La copie et la distribution de ce catalogue ne sont pas autorisées sans autorisation préalable.

Wristar MultiAx

Kit stérile pour radius distal.

Le kit fournit des implants et des instruments à usage unique de haute qualité conçus pour améliorer l'efficacité de la salle d'opération.

Il favorise l'efficacité de la procédure en simplifiant la gestion des instruments et des implants pendant l'intervention chirurgicale. L'instrumentation innovante à usage unique permet de conserver la même routine chirurgicale que celle pratiquée actuellement.

Amélioration du flux de travail

Le kit à usage unique avec instruments et implants est conçu pour aider à optimiser l'efficacité du flux de travail dans le bloc opératoire.

Prêts à l'emploi

Conçu pour les procédures chirurgicales standard, le kit de base est livré avec des instruments et des implants à usage unique de haute qualité: toujours neufs, toujours complets et toujours prêts à l'emploi.

Économique

Le kit stérile pour radius distal Wristar est une solution économique.

Les coûts supplémentaires incluant le nettoyage, la décontamination et la stérilisation des instruments sont éliminés.



/ Kit stérile pour radius distal

Indications


Le kit à usage unique Intrauma pour radius distal est indiqué pour les fractures intra et extra-articulaires du radius distal (2R3-A2 et 2R3-A3, 2R3-B/C) et les ostéotomies du radius distal.

Les vis MultiAx peuvent être orientées n'importe où dans un cône de 30°

Forme anatomique pré-moulée et discrète pour minimiser l'irritation des tissus mous

Fenêtre permettant de visualiser la fracture et la reconstruction de l'articulation

Répartition égale des forces sur l'ensemble de la structure, ce qui réduit le risque de rupture de l'implant et de desserrage des vis

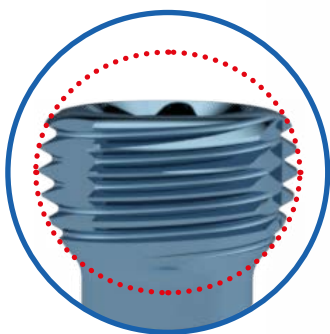

La tête de la vis MultiAx de 2.5mm a une forme arrondie pour permettre différents angles dans l'orifice de verrouillage

Technique chirurgicale.

Positionnement du patient:


placer le patient en position allongée sur le dos, l'avant-bras sur une table radiotransparente.

Approche:

réaliser une incision longitudinale légèrement radiale par rapport au tendon du muscle fléchisseur radial du carpe (FCR). Inciser entre le FCR et l'artère radiale, en exposant le muscle carré pronateur (PQ). Détacher le PQ du bord latéral du radius et l'élever vers le cubitus pour exposer la surface du poignet du radius.

• 1

Percer un trou dans la fente coulissante avec la pointe de Ø2.2mm (SKM1.0007) en utilisant le foret universel de Ø2.2mm (SKM1.0001).

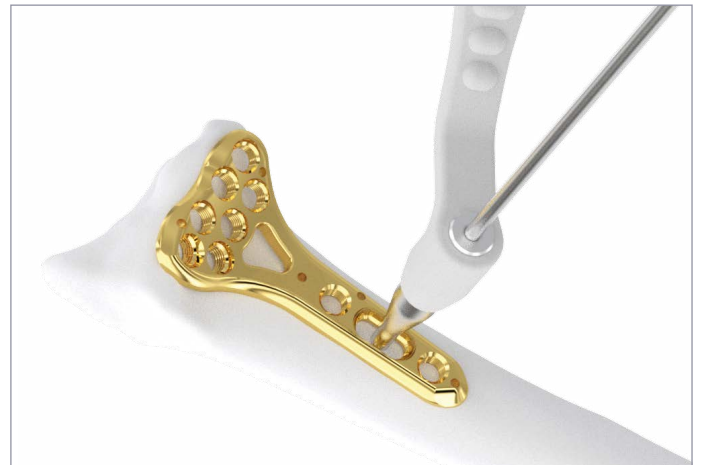

• 2


Déterminer la longueur de la vis à utiliser à l'aide de la jauge de profondeur (SKM1.0002).



Technique chirurgicale.

• 3

Insérer la vis corticale de Ø2.7mm avec le tournevis hexalobulaire HL8 (SKM1.0003).
Ajuster la position de la plaque.

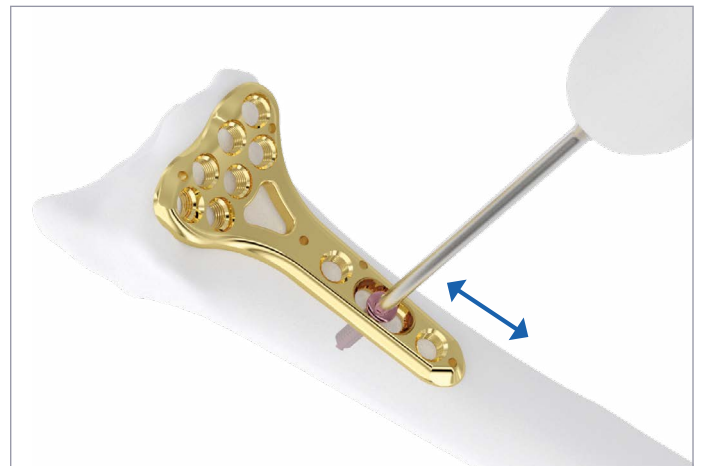

• 4

Si nécessaire, utiliser des broches de Kirschner de Ø1.2mm (SKM1.0006) pour fixer temporairement les fragments.



• 5 - Uniaxiale

Visser le foret coaxial de Ø2.2mm (SKM1.0004) dans l'orifice souhaité dans l'épiphyse et percer avec la pointe (SKM1.0007).




• 5 - Polyaxiale

Insérer le foret universel de Ø2.2mm (SKM1.0001) dans l'orifice souhaité en l'inclinant en conséquence et percer avec la pointe (SKM1.0007).




• 6

Insérer la vis MultiAx de Ø2.5mm avec le tournevis hexalobulaire HL8 (SKM1.0003).

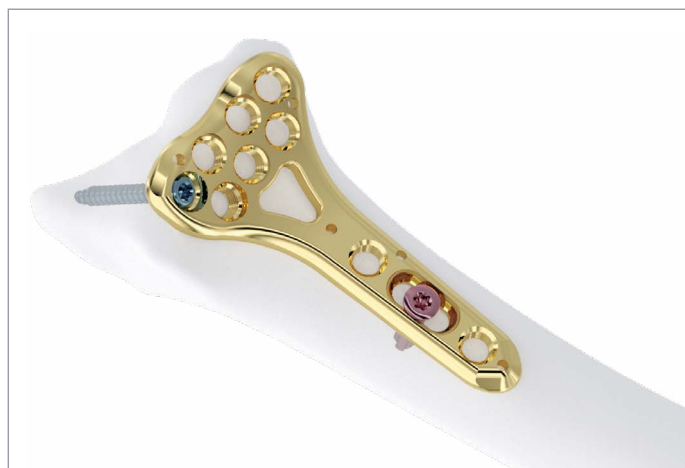


• 7

Compléter l'implant en insérant les vis restantes.

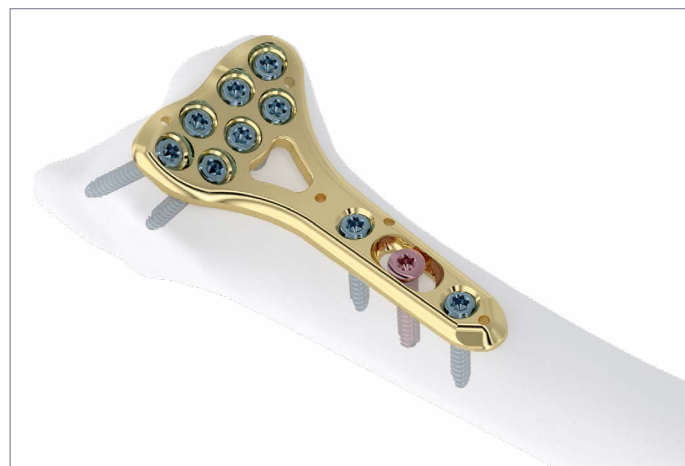

Composition du kit.

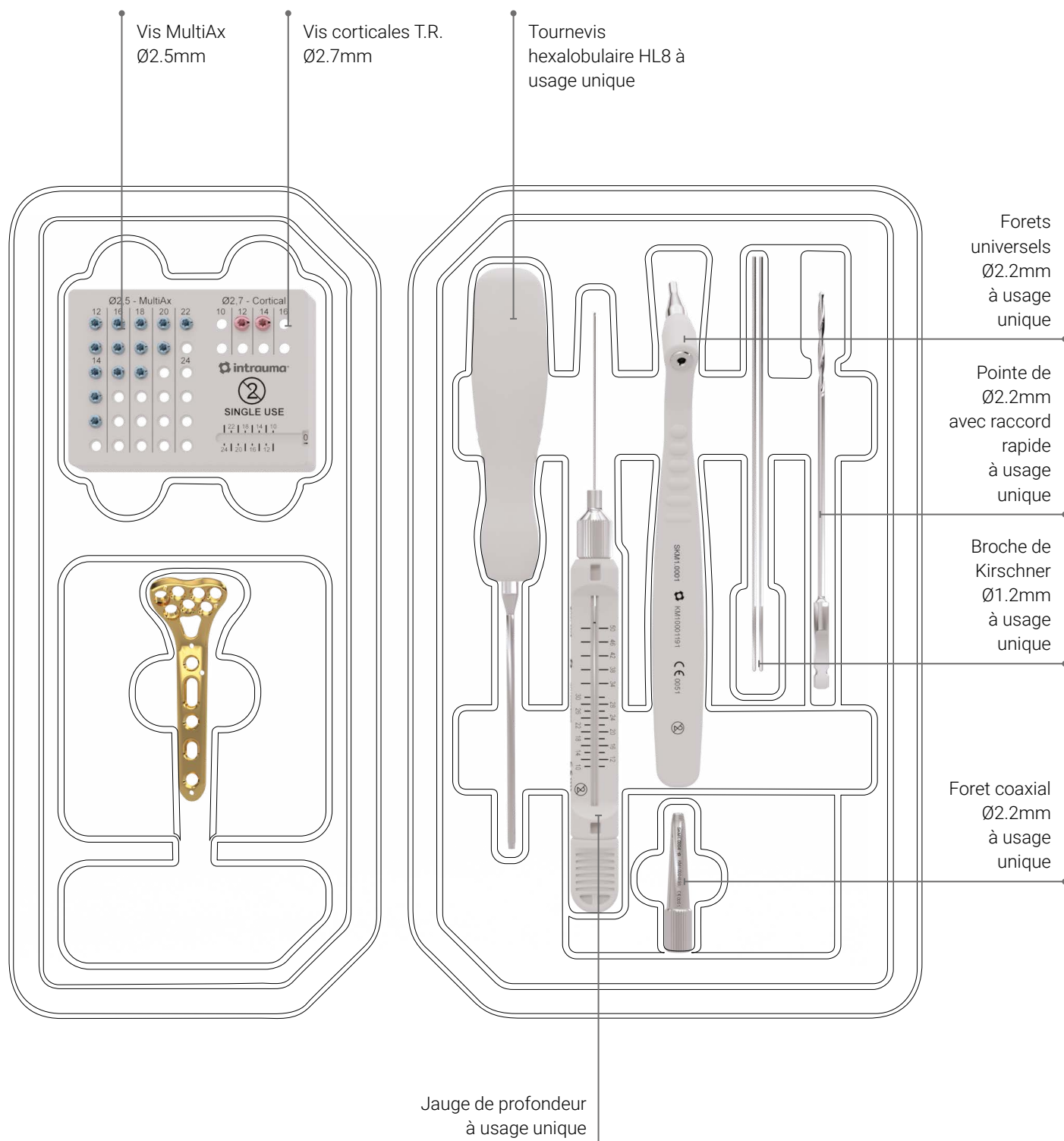

Informations sur les commandes.



Réf.	Description	L. mm	Orifices d'épiphyse		Orifices de diaphyse	
			Verrouillés	Non verrouillés	Verrouillés	Non verrouillés
KM1.9031	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (G) petit	47	7	0	2	1
KM1.9032	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (D) petit	47	7	0	2	1
KM1.9033	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (G) moyen	50	7	0	2	1
KM1.9034	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (D) moyen	50	7	0	2	1
KM1.9035	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (G) petit long	64	7	0	3	2
KM1.9036	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (D) petit long	64	7	0	3	2
KM1.9037	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (G) petit long	67	7	0	3	2
KM1.9038	KIT - WRISTAR MultiAx Supp. radius distal palmaire (D) petit long	67	7	0	3	2
T120.903X	Support d'essai WRISTAR MultiAx 120.9031-2-3-4-5-6-7-8 disponibles sur demande					

Matériaux:

Supports | Titane pur GR.4 - ISO 5832-2

Vis | Titane Ti6Al4V - ISO 5832-3



Intrauma S.p.A.

Siège légal et administratif: Via Meucci, 5 - 10090 Bruino (TO) Italy

T: +39 011.95.39.496 | F: +39 011.95.88.385 | intrauma.com | info@intrauma.com
