


Fixateur externe calcanéen

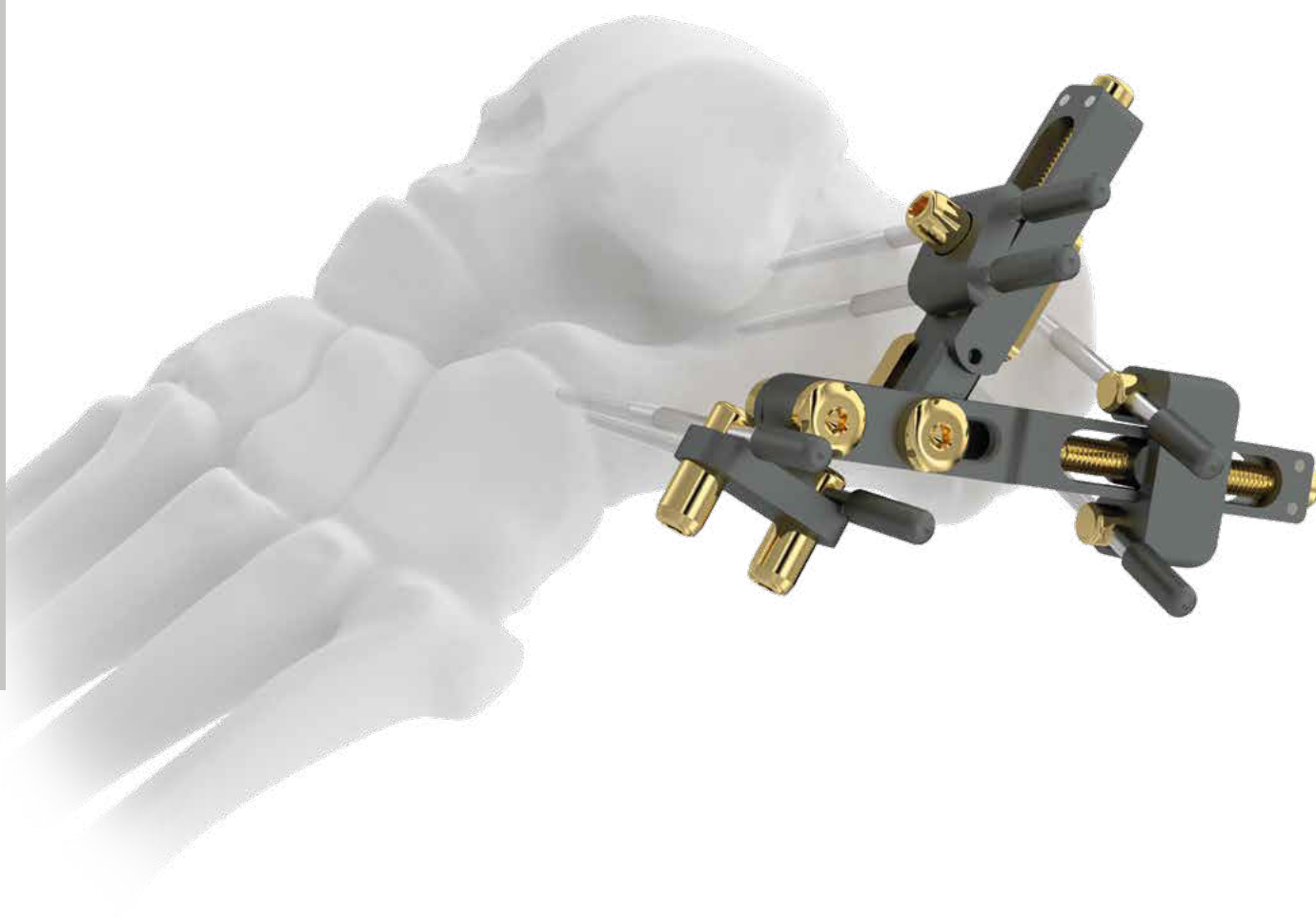

Données et images

Intrauma S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, la conception et les finitions des produits présentés et décrits dans ce catalogue. Les images sont fournies à titre purement informatif.

Les informations présentées sont données à titre indicatif et portent uniquement sur certaines caractéristiques générales des produits figurant dans ce document.

Ces informations ne constituent en aucun cas une description des caractéristiques spécifiques par le Fabricant. Par conséquent, nous recommandons au client de contacter systématiquement la société Intrauma S.p.A. afin d'obtenir des informations complètes sur les caractéristiques spécifiques.

© Le contenu de ce catalogue est protégé par le droit d'auteur.

La reproduction de ces contenus n'est possible qu'avec l'autorisation expresse d'Intrauma S.p.A. Il est interdit de copier et de diffuser ce catalogue sans autorisation préalable.




Fixateur externe calcanéen

Indications

Fractures articulaires du calcanéum

- Classification TDM de Sanders I II III IV
- Classification radiographique de Rowe IV
Fractures obliques ou coronales
- Classification radiographique de Rowe III

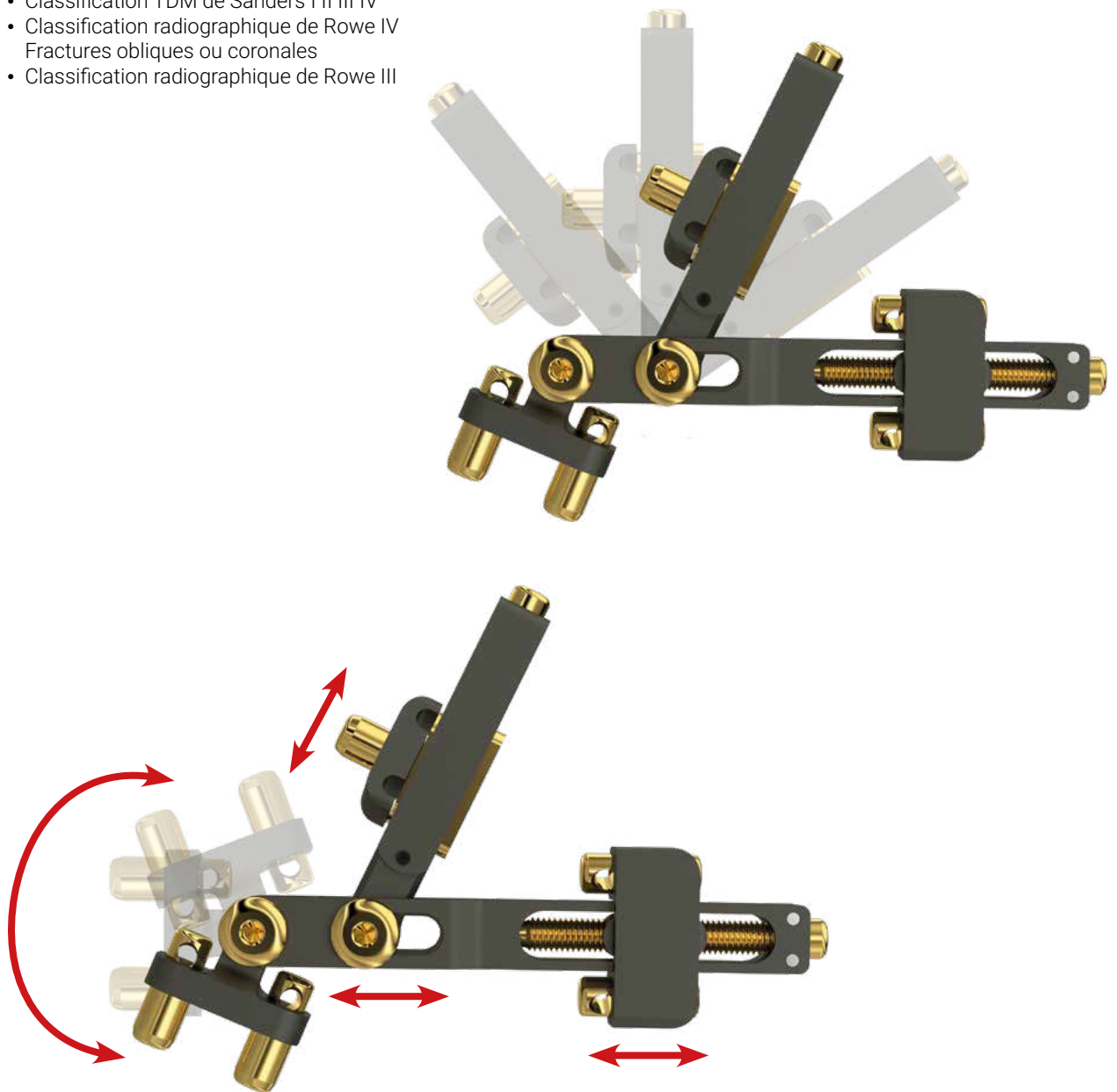


Caractéristiques du produit

- Les pinces pivotantes permettent d'ajuster l'orientation des broches.
- L'unité de compression et de distraction facilite la réduction des fragments.
- Broches filetées pivotantes Ø3 mm.
- Douilles de guidage pour une fixation temporaire.

Fixateur externe calcanéen

Réf.	Description
KXF1.0001	KIT TAKOFIX Fixateur externe calcanéen (G)
KXF1.0002	KIT TAKOFIX Fixateur externe calcanéen (D)

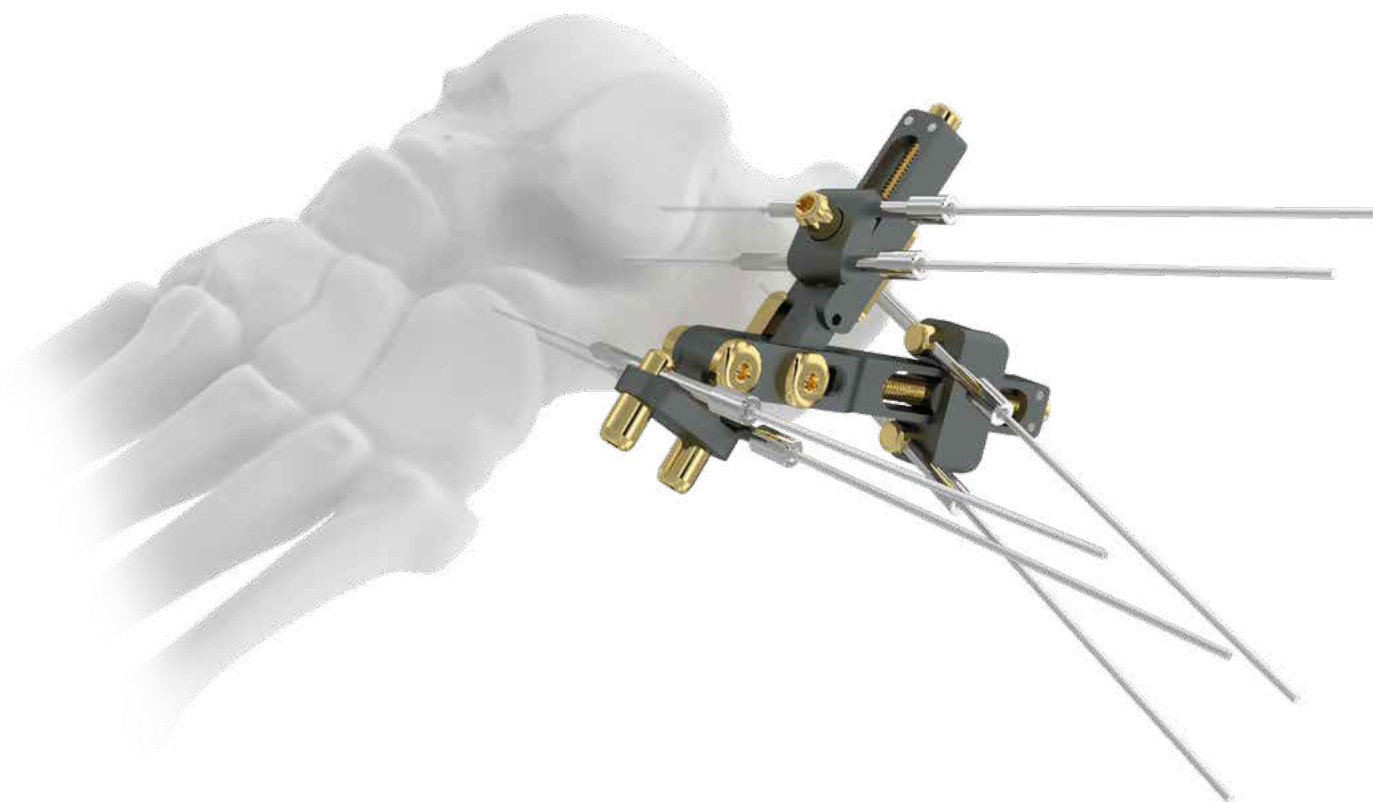


Le KIT - Fixateur externe calcanéen
TAKOFIX, en emballage stérile, comprend :

Réf.	Description
SXF1.0001	Manchon pour broche K Ø1,5 mm
SXF1.0002	Broche K Ø1,5 mm x 150 mm
SXF1.0003	Clé hexagonale 3,0 mm
SXF1.0005	Clé en T pour broches
SXF1.0006	Capuchon de broche
XF1.0001	KIT - Fixateur externe calcanéen TAKOFIX (G)
XF1.0002	KIT - Fixateur externe calcanéen TAKOFIX (D)
XF1.2001	Broche TAKOFIX Ø3,0 mm 70/25
XF1.2002	Broche TAKOFIX Ø3,0 mm 100/30

Technique chirurgicale du fixateur externe calcanéen


Préparation.

Desserrez les vis des pinces d'environ deux tours à l'aide de la clé hexagonale de 3,0 mm (SXF1.0003), puis insérez la douille de broche K Ø1,5 mm (SXF1.0001) dans les pinces. Resserrez les pinces de façon à maintenir les douilles en place tout en permettant leur déplacement à la main. Desserrez l'articulation de tête et les vis de la barre latérale (moins d'un tour) avec la clé hexagonale afin qu'elles puissent être orientées à la main et restent en position.

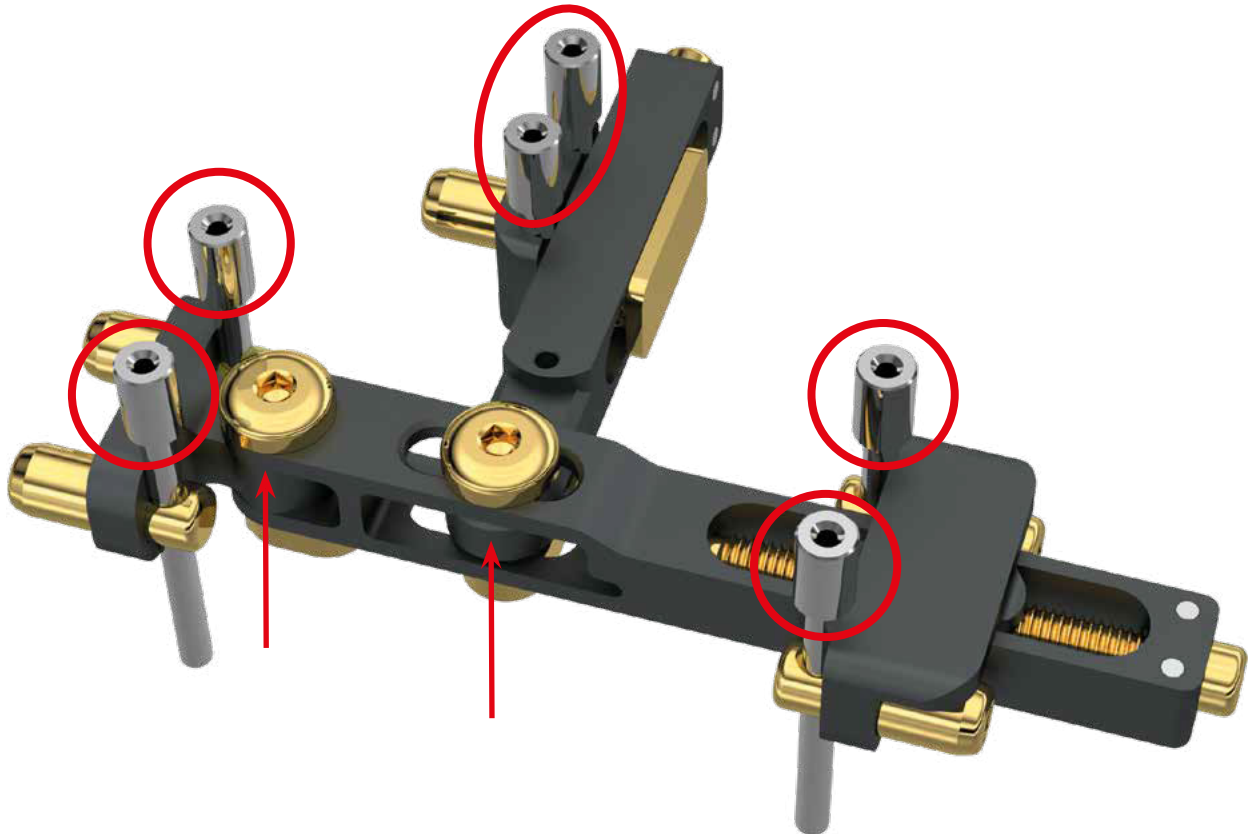


1.

Repérez les points d'insertion des broches en fonction du type de fracture.

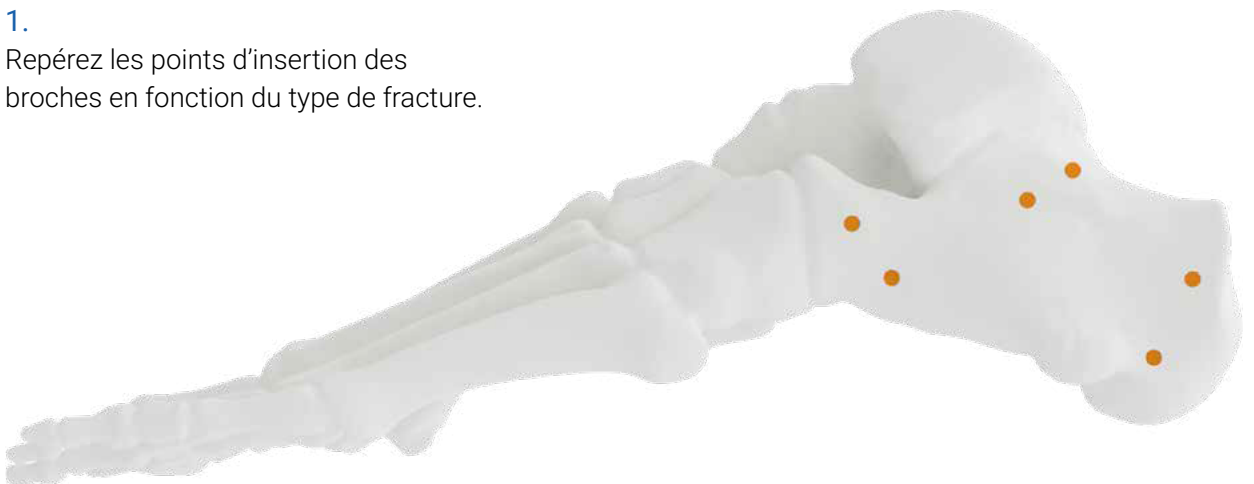

Technique chirurgicale du fixateur externe calcanéen

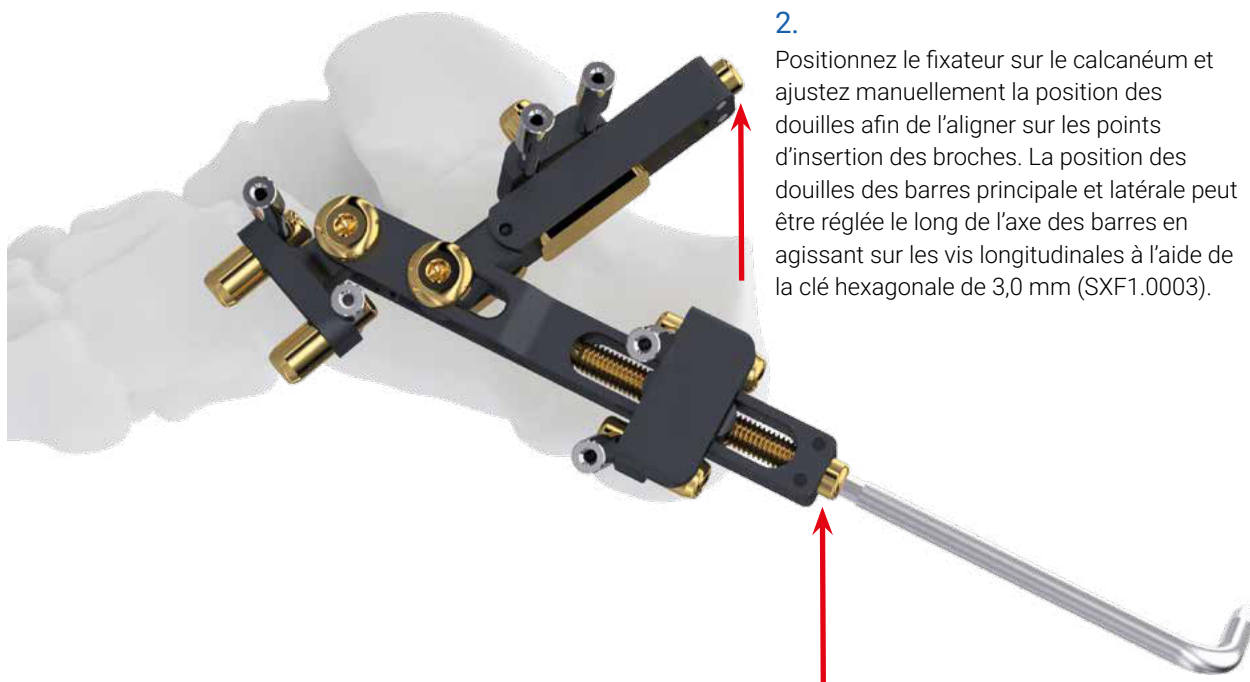


3. Insérer le fil de Kirschner Ø1,5 mm (SXF1.0002) à travers la douille pour fil K (SXF1.0001) de la barre latérale.



4.


Insérer le deuxième fil de Kirschner (SXF1.0002) à travers la deuxième douille de la barre latérale.

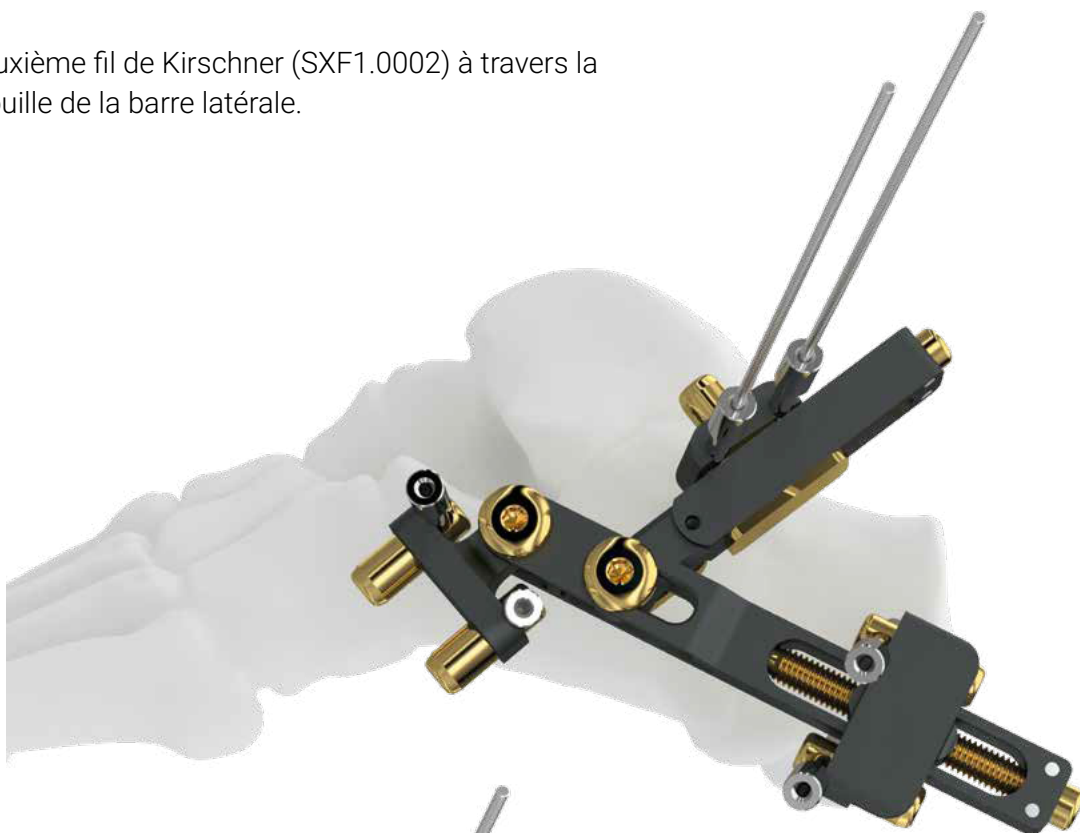


5.

Insérez les quatre broches K restantes (SXF1.0002) dans les pinces de l'articulation de tête et de la barre principale, en passant par la douille pour broche K (SXF1.0001).

6. À l'aide de la clé hexagonale de 3,0 mm (SXF1.0003), desserrez la première pince, puis retirez le fil de Kirschner (SXF1.0002) ainsi que la gaine du fil de Kirschner (SXF1.0001).

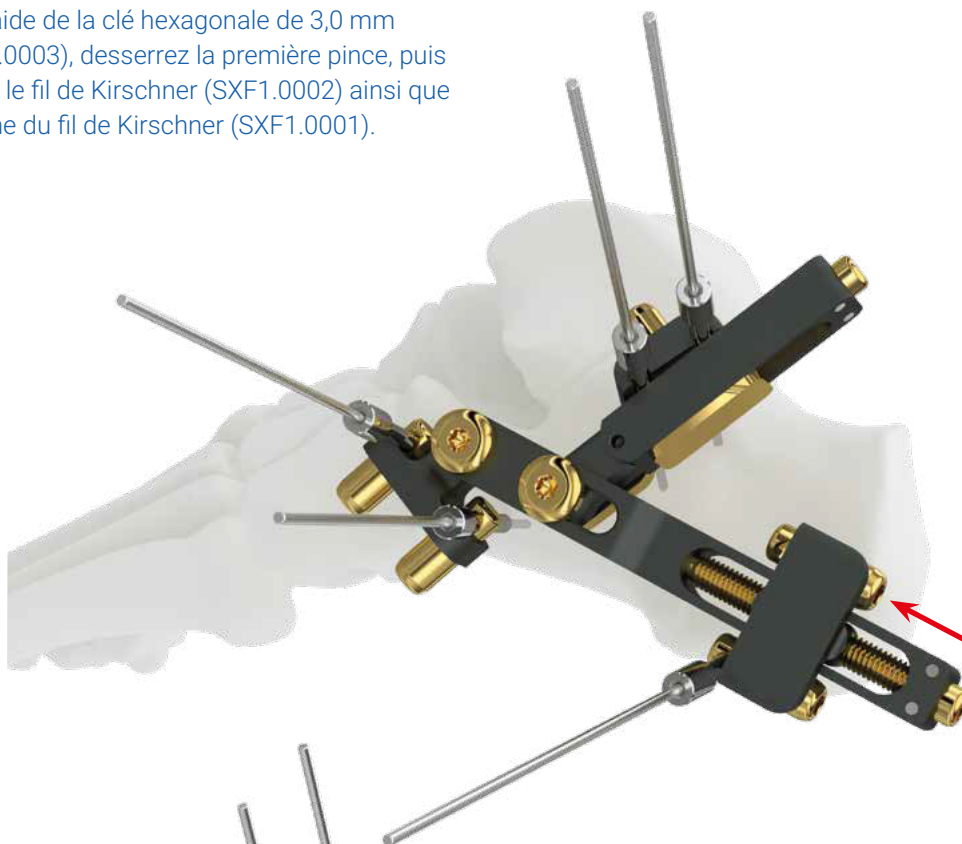

7. À l'aide de la clé en T pour broches (SXF1.0005), insérez une broche Ø3,0 mm (XF1.2001) ou (XF1.2002) dans la pince à l'emplacement où le fil de Kirschner et son manchon viennent d'être retirés.

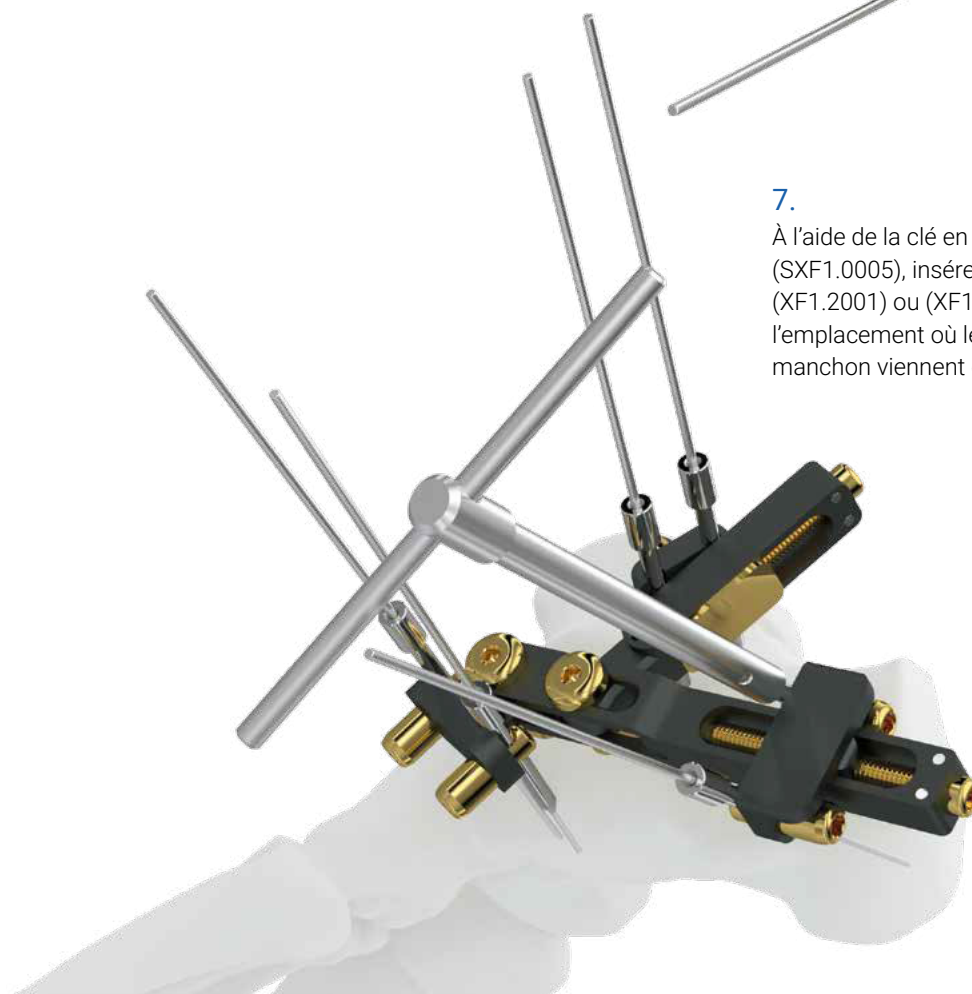

8.

Verrouiller la pince de la broche à l'aide de la clé hexagonale de 3,0 mm (SXF1.0003)




9.

Répétez les étapes 6. à 8. pour toutes les broches du fixateur.

Technique chirurgicale du fixateur externe calcanéen

10.

Serrer les vis de l'articulation de la tête et de la barre latérale. Si nécessaire, il est possible de réaliser une distraction des fragments en agissant sur les vis longitudinales de la barre principale et de la barre latérale.

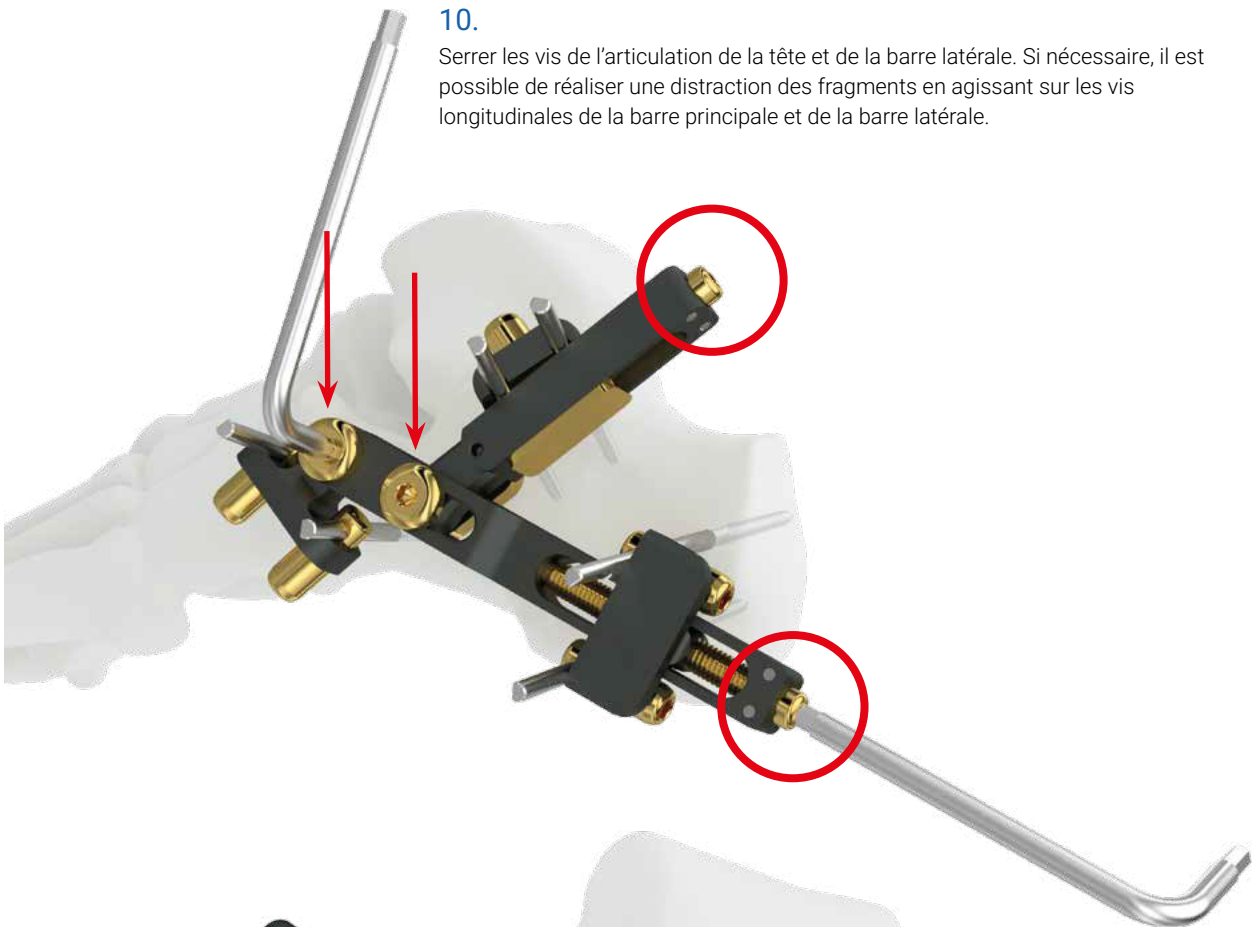

11.

Mettre en place des capuchons en polymère sur les têtes des broches afin de les protéger.



Intrauma S.p.A. - Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO) Italie
Tél. +39.011.953.94.96 - Fax +39.011.958.83.85
info@intrauma.com - www.intrauma.com

