


/ Kit stérile pour péroné distal

Indications

Le kit à usage unique Intrauma pour péroné distal est indiqué pour:

- Fractures diaphysaires et métaphysaires de la partie distale du péroné (4F3).
- Fractures intra et extra-articulaires de la partie distale du péroné (44-A/B/C).
- Non-unions du péroné distal.

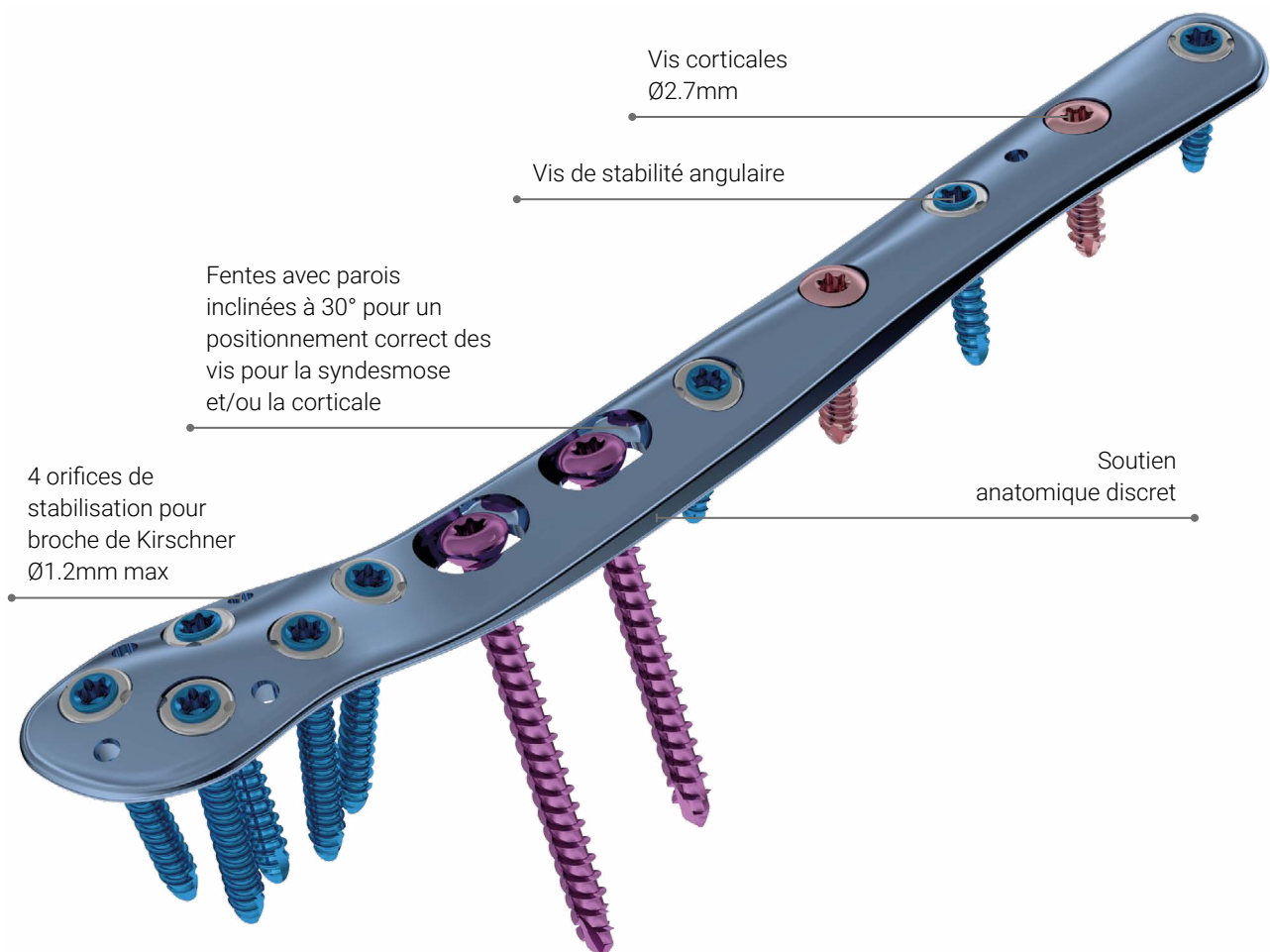

Technique chirurgicale.

Positionnement du patient:

placer le patient en position allongée sur le dos sur une table radiotransparente. Il est recommandé de disposer d'images du péroné distal en vue latérale et antéro-postérieure.

Approche:

pratiquer une incision latérale ou postéro-latérale pour exposer la fracture ainsi que le péroné distal et diaphysaire pour l'application de la plaque.

• 1

À l'aide de la pointe de Ø2.2 mm (SKM1.0007) et du foret universel de Ø2.2mm (SKM1.0001), percer un trou pour la vis corticale non verrouillable de Ø2.7mm dans la diaphyse.



• 2

Utiliser la jauge de profondeur pour déterminer la longueur de la vis (SKM1.0002).



• 3

Insérer la vis à l'aide du tournevis hexalobulaire HL8 (SKM1.0003).



Technique chirurgicale.

• 4

Positionner le guide-mèche conique (SKM2.0004) dans la douille de la plaque.



• 5

En utilisant la mèche de Ø2.2mm (SKM1.0007) et le guide-mèche conique de Ø2.2mm (SKM2.0004) inséré dans la douille, percer un trou pour la vis de verrouillage de Ø2.5mm dans l'épiphyse.



• 6

Retirer le guide de perçage conique en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.



• 7

Insérer la vis à l'aide du tournevis hexalobulaire HL8 (SKM1.0003).



• 8

Continuer avec l'insertion des vis de verrouillage dans l'épiphyse et des vis corticales de non-verrouillage dans la diaphyse. Insérer les vis de verrouillage restantes dans la diaphyse.



• 9

Si nécessaire, insérer les vis pour la syndesmose de Ø3.0mm (non comprises dans le kit) en utilisant le foret universel de Ø2.2mm (SKM1.0001) et la pointe de Ø2.2mm (SKM1.0007).

